

## تعليمات اختبار المستضد السريع في المنزل

BTNX Rapid Response®

## الموارد

لمزيد من المعلومات حول الاختبار السريع، والإصدارات المترجمة من هذا الدليل، ومقاطع الفيديو حول كيفية إجراء الاختبار، استخدم رمز الاستجابة السريعة أدناه، أو قم بزيارة الموقع: [bccdc.ca/covid19rapidtesting](https://bccdc.ca/covid19rapidtesting)

français •

繁體中文 •

한국어 •

简体中文 •

عربي •

ਪੰਜਾਬੀ •

فارسی •

Việt Ngữ •



español •

ትግርኛ



## قبل البدء

- احتفظ بطقم الاختبار هذا في درجة حرارة الغرفة، أو في أي مكان، بين 2 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية (لا تخزّنه في الفريزر «المجمد»، وأحفظه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة؛ ولا تتركه في السيارة).
- ابحث عن سطح مستوٍ نظيف (خالٍ من الطعام أو المشروبات أو المتعلقات) يسهل تنظيفه في حالة حدوث انسكاب.
- لا تأكل، أو تشرب، أو تدخن، أو تستنشق بخار النيكوتين (فيب)، أو تضع العدسات اللاصقة، أو تضع المكياج، أو تلمس وجهك أثناء الاختبار.
- هذا الاختبار تجريه بنفسك. لا يوصى إجراء هذا الاختبار مع الأطفال دون سن الخامسة.
- لا تجري هذا الاختبار إذا كان لديك نزيف في الأنف في آخر 24 ساعة.

## التعرف على دقة الاختبار الذي تجريه

اختبار المستضد السريع يكشف المستضدات (البروتينات) للفيروس المسبب لكوفيد-19. قد يمر من 3 إلى 7 أيام بعد العدوى ليكون هناك ما يكفي من الفيروس لكي يكتشفه الاختبار. إذا كان الشخص مصاب بكوفيد-19 وأجرى الاختبار في زمن قليل بعد الإصابة، فإن نتيجة الاختبار قد تكون سلبية، وهذا يعني أن النتيجة سلبية زائفة.

يوفر اختبار المستضد السريع نتيجة تقتصر على زمن إجرائها فقط. النتيجة السلبية لا تضمن أن الفرد ليس مُعديًا. إذا كنت قد تعرضت مؤخرًا لفيروس كورونا، قد تظهر نتيجة الاختبار إيجابية في وقت لاحق بمجرد وجود ما يكفي من المستضدات في أجهزة جسمك يكشفها الاختبار.

## التعليمات:

يتضمن طقم اختبار BTNX ما يلي:


أنيوب اختبار  
غطاء لأنبوب  
الاختبار  
قنينة بها سائل



جهاز الاختبار



حامل أنبوب الاختبار

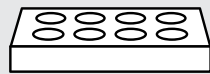

مسحة معقمة



تجميع أدوات الاختبار:

- طقم اختبار BTNX:
- عدد 1 جهاز اختبار
- عدد 1 مسحة معقمة
- عدد 1 قنينة بها سائل
- عدد 1 أنبوب اختبار مزود بغطاء
- عدد 1 حامل أنبوب الاختبار (إذا كان متوفرًا)

2

1 نطّف أنفك بإخراج الزفير منه بقوة في منديل ثم تخلص منه. اغسل يديك بالصابون.



• مؤقّت

• صفيحة قمامة

• كوب زجاج صغير أو فنجان (اختياري)



كوب زجاج أو فنجان (اختياري)



صفيحة قمامة




مؤقّت


## تعليمات اختبار المستضد السريع في المنزل

BTNX Rapid Response®

**5** ضع أنبوب الاختبار المملوء في حامل أنبوب الاختبار المُجمَّع، أو كوب زجاجي أو فنجان نظيف.

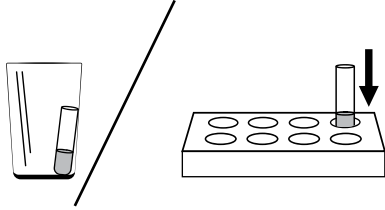

**4** اعصر كل السائل من القنينة إلى داخل أنبوب الاختبار.

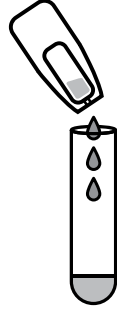

**3** قم بلي الجزء العلوي من القنينة التي بها سائل.



**6** جمع عينة الأنف:

**1** أخرج المسحة من غلافها. المس المقبض البلاستيكي فقط.  
**2** أمل رأسك إلى الوراء.

**3** أدخل الطرف القطني من المسحة إلى خلف الرأس بشكل مستقيم (وليس لأعلى) في إحدى فتحتي الأنف لمسافة 2.5 سم (1 بوصة). توقف عندما لا تستطيع إدخال المسحة إلى أبعد من ذلك. ولا ينبغي أن يكون هذا الإجراء مؤلماً.



**4** ضع المسحة مقابل محيط أنفك من الداخل. قم بتدوير المسحة بلطف لمدة 5 ثوان. اضغط بإصبعك على جانب الأنف ثم قم بتدوير المسحة لمدة 5 ثوان أخرى.

**5** كرر العملية في فتحة الأنف الأخرى بنفس المسحة.

لا تستخدم المسحة في الاختبار إذا كان هناك أي دم عليها. نظّف أنفك بإخراج الزفير منه بقوة، واستخدم مسحة جديدة. إذا كان لديك نزيف بالأنف، انتظر 24 ساعة قبل إجراء الاختبار.


الجانب الأيسر

5 ثوان + 5 ثوان



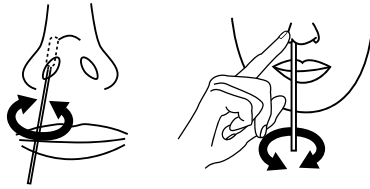
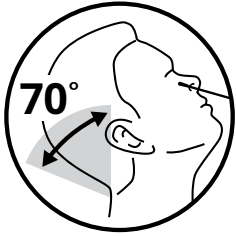


الجانب الأيمن

5 ثوان + 5 ثوان

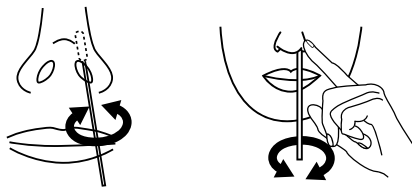

**7** أدخل بلطف الطرف القطني من المسحة في أنبوب الاختبار:

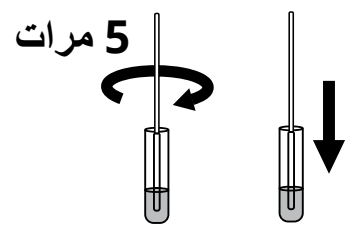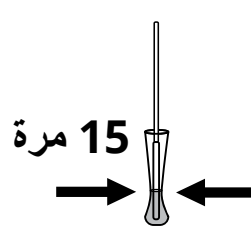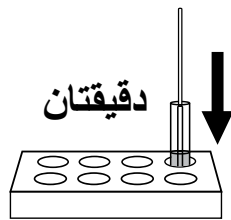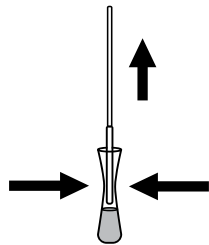

**4** قم بإخراج المسحة مع الضغط في الوقت نفسه على جانبي الأنبوب لعصر كل السائل من المسحة. تخلص من المسحة بإلقائها في سفيحة القمامة.

**3** اترك المسحة في الأنبوب. ضع الأنبوب مرة أخرى في حامل أنبوب الاختبار. اتركه لمدة دقيقتين.

**2** أثناء وجود المسحة بداخل الأنبوب، اضغط الجزء الخارجي من الأنبوب في مقابل الجزء السفلي من المسحة من 10 مرات إلى 15 مرة.

**1** لف المسحة بلطف وبيبط في السائل 5 مرات، مع الضغط عليها في مقابل جانب الأنبوب. تجنب الطرشة وتناثر أي سوائل.

## تعليمات اختبار المستضد السريع في المنزل

BTNX Rapid Response®


8 أحكم سدّ الأنبوب بالغطاء.



9 افتح جهاز الاختبار وضعه على سطح مستو (مثل منضدة أو طاولة).



10 أمسك الأنبوب وضعه مباشرة على جهاز الاختبار، بحيث يشير الغطاء مباشرة إلى الأسفل. اعصر الأنبوب ببطء لإخراج 3 قطرات على الدائرة الموجودة على جهاز الاختبار.



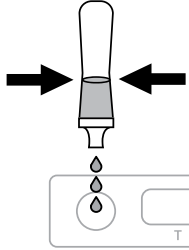


لا تدع أنبوب الاختبار يلمس الدائرة.

11 اضبط المؤقت على 15 دقيقة للحصول على النتيجة الخاصة بك. لا تحرك جهاز الاختبار أثناء هذا الوقت. القراءات بعد 15 دقيقة قد لا تتصف بالدقة.

12 ضع كل أدوات الاختبار في القمامة.

13 اغسل يديك.

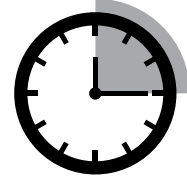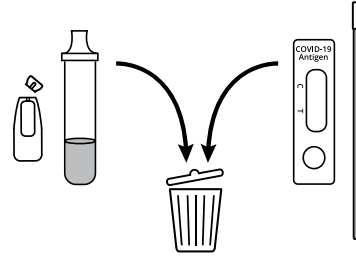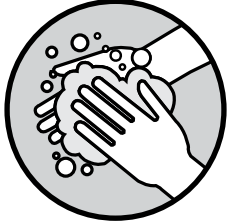


### كيفية قراءة نتائجه

لا يهيم أي خط ظهر أولاً، أو أن تبدو الخطوط باهتة.

اطلب الرعاية الطبية إذا كنت تشعر أنك بحاجة إليها، بغض النظر عن نتائج الاختبار.

نتيجة غير صالحة  
خط التحكم (C) غير موجود

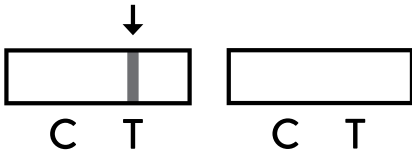


إذا كان الاختبار غير صالح، تخلص من كافة أدوات الاختبار الأول. اغسل يديك، وكّرر العملية باستخدام المجموعة الثانية من أدوات الاختبار. اتبع إرشادات الاختبار مرة أخرى.

إذا كانت نتيجتي الاختبار غير صالحتين، توجه للاختبار لدى أي من أماكن اختبار كوفيد-19.

البحث عن مكان اختبار: [healthlinkbc.ca/covid19test](https://healthlinkbc.ca/covid19test)

نتيجة إيجابية  
يظهر خط التحكم (C) وخط الاختبار (T)

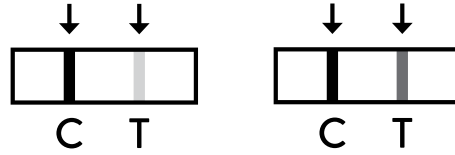


النتيجة الإيجابية تعني أنه من المحتمل أن يكون لديك فيروس كورونا ويمكنك نقله إلى الآخرين.

تحقق إذا كان بإمكانك الاستفادة من العلاج على موقع [gov.bc.ca/covidtreatments](https://gov.bc.ca/covidtreatments) أو اتصل على 1-888-268-4319

تحتاج أن تعزل نفسك. للمزيد من المعلومات عن الخطوات التالية، زر موقع [bccdc.ca/ifyouhavecovid](https://bccdc.ca/ifyouhavecovid)

نتيجة سلبية  
يظهر خط التحكم (C) فقط

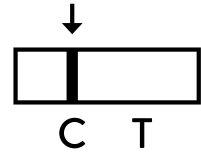

إذا كانت النتيجة سلبية، فهذا يعني أنه لم يتم اكتشاف فيروس كورونا. لا يزال من الممكن أن تكون مصاباً بفيروس كورونا.

اعزل نفسك حتى تتحسن أعراضك، وتشعر بصحة جيدة بما فيه الكفاية للعودة إلى الأنشطة العادية. إذا كنت قد تلقيت تعليمات بعزل نفسك من طرف هيئة الصحة العامة، يجب أن تستمر في عزل نفسك حتى إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية.